


NAVODILA

ZA UPORABO TELEFONA


Premier

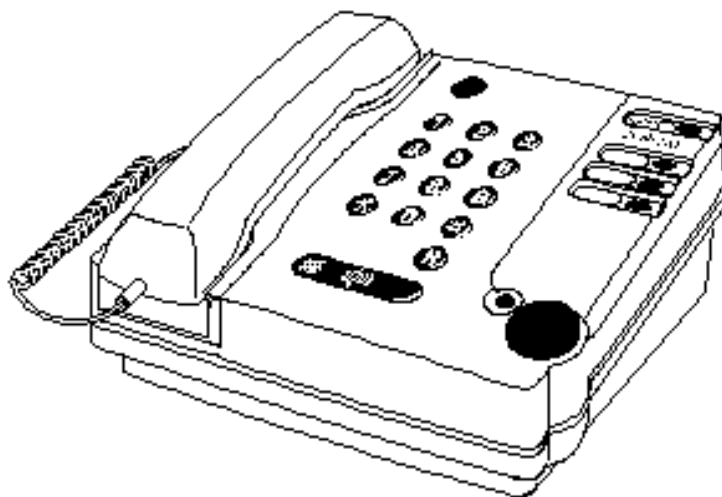

- **VAŠ TELEFON *Premier***
- **KAJ STORITI V SILI**
- **V VLOGI NAVADNEGA TELEFONSKEGA APARATA**
- **DODATKI TELEFONU *Premier***
- **OPOZORILA**

TELEFON *Premier*


TELEFON *Premier*

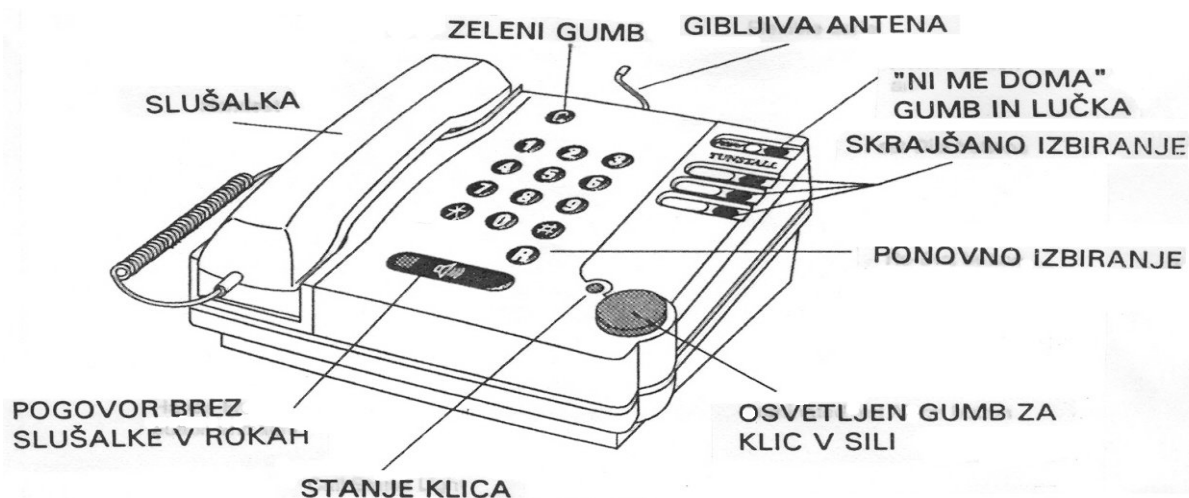

Premier je poseben telefonski aparat iz družine *Lifeline* za klic v sili, ki ga priključimo na obstoječe telefonsko omrežje. Namenjen je tistim, ki živijo sami in občasno ali le izjemoma potrebujejo pomoč na domu.

S telefonom *Premier* sami pokličete na pomoč, v nekaterih primerih pa to samodejno opravi naprava. Telefonu *Premier* lahko vpišemo šest telefonskih števil, na katere se usmeri nujni klic. Številke, na katere boste želeli usmeriti nujni klic, bo namesto vas s pomočjo tipkovnice vpisala strokovno usposobljena oseba, ali pa bo to storila na daljavo po telefonski žici. Klic v sili lahko sprožite na več načinov. Najenostavneje to opravite z brezžičnim sprožilom npr. kar s tal, iz postelje ali naslonjača, od koder se lahko brez slušalke v rokah pogovarjate z osebo na drugi strani žice. Ta oseba je lahko kdo od svojcev, sosed ali dežurna oseba v Centru za pomoč na domu.

Vaše brezžično sprožilo je pravzaprav majhen radijski oddajnik, ki mora biti vedno pri roki. Je lahek, vodotesen in primeren za pripenjanje na vse vrste oblačil. Podnevi ga nosite pripetega na bluzo, pas, jopico itd., ponoči pa ga imejte pri postelji. Ob pritisku na rdeči gumb brezžičnega sprožila boste ukazali posebnemu telefonu *Premier*, naj pokliče npr. v Center za pomoč na domu. Dežurni operater bo če vedel, kdo ste in kje živite, tudi v primeru, če ne morete govoriti ali če ne boste slišali njegovega glasu po zvočniku telefona.

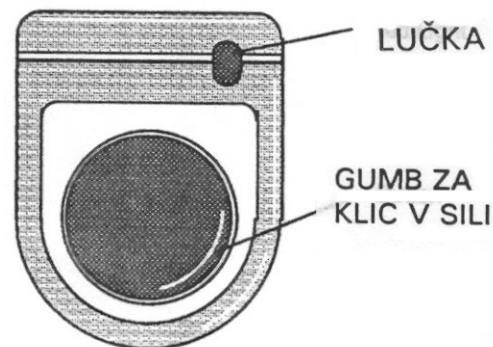

PRIKLJUČITEV TELEFONA *Premier*

Telefon *Premier* usposobite za delo tako, da napajalnik vtaknete v vtičnico 220V električnega omrežja, vtikač na koncu telefonske vrvice pa vtaknete v telefonsko vtičnico v zidu. Rdeči gumb za klic v sili na telefonu *Premier* mora svetiti, iz dvignjene slušalke pa se mora slišati znak telefonske centrale. Če rdeči gumb ni osvetljen, preverite omrežni priključek. V primeru, da iz slušalke ne prihajajo značilni toni ("tu...tu"), preverite priključitev telefonske vrvice.


PRIKLJUČITEV DODATNEGA TELEFONA VZPOREDNO TELEFONU *Premier*

Svetujemo vam, da k posebnemu telefonu *Premier* ne priključujete drugega telefona. Vaš poseben telefon bo tako deloval zanesljivejše. Tudi PTT predpisi omejujejo priključitev več telefonov na en telefonski priključek, saj lahko pride do preobremenitve telefonske linije.


KAJ STORITI V SILI

Za klic v sili:

-pritisnite rdeči "RDEČI GUMB ZA KLIC V SILI" na telefonu

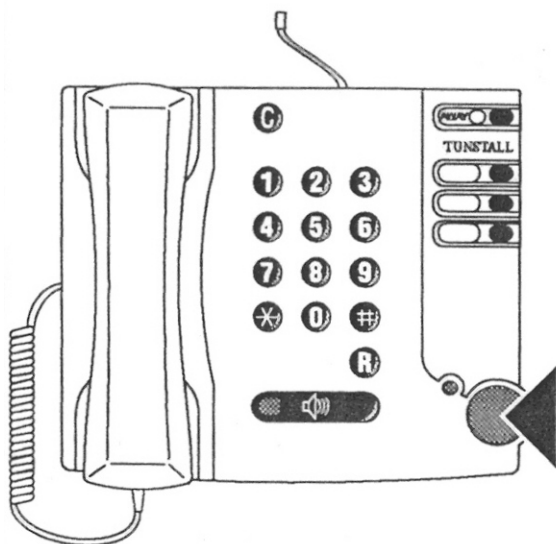

ALI

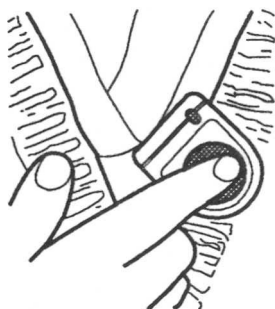

-pritisnite rdeči "GUMB ZA KLIC V SILI" na vašem brezžičnem sprožilu. V obeh primerih pritisnite **samo en gumb** in to le **enkrat**. Če se nahajate v bližini telefona, boste opazili, da bo pričela lučka "STANJE KLICA" desno spodaj na telefonu utripati. čez nekaj časa se bo oglasila oseba s telefonske številke, ki je vpisana v vaš telefon - npr. dežurni operater Centra za pomoč na domu. Razložite mu, kaj vas teži, da bo priskrbel ustrezno pomoč.

PREKINITEV POMOTOMA SPROŽENEGA KLICA V SILI

Pritisnite zeleni gumb "C" - gumb za "VRNITEV V STANJE PRIPRAVLJENOSTI" na zgornji levi strani telefona *Premier*. če to storite dovolj kmalu, prekinete klic v sili, telefon pa se povrne v stanje pripravljenosti. če vam to ne uspe, nič zato. Klicana oseba oz. dežurni operater v Centru za pomoč na domu bo vesel, da je z vami vse v redu in da vaš telefon *Premier* dobro deluje.


VAŽNO OPOZORILO!

*Če ste ob zvonjenju telefona Premier "dvignili slušalko" s pritiskom na rdeči gumb brezžičnega sprožila in se še pogovarjate, sprožite klic v sili tako, da **dvakrat pritisnete na rdeči gumb**: po prvem pritisku **počakajte**, da bo lučka na brezžičnem sprožilu **zasvetila in ugasnila**. Nato ponovno pritisnite na rdeči gumb.*

KONČANJE KLICA V SILI

Klic v sili, ki je bil usmerjen v Centru za pomoč na domu, bo sprejel in končal operater v centru. S pomočjo svoje naprave bo, potem ko bo poskrbel za vas, kar na daljavo "odložil slušalko" vašega telefona *Premier* in tako končal klic.


Če je bil vaš klic v sili usmerjen na telefonsko številko, na katero je priključen navaden telefonski aparat (npr. k vašim svojcem ali sosedom), je potrebno klic v sili končati s posebnim postopkom in tako preprečiti, da bi telefon *Premier* samodejno klical še na druge vpisane številke za klic v sili.

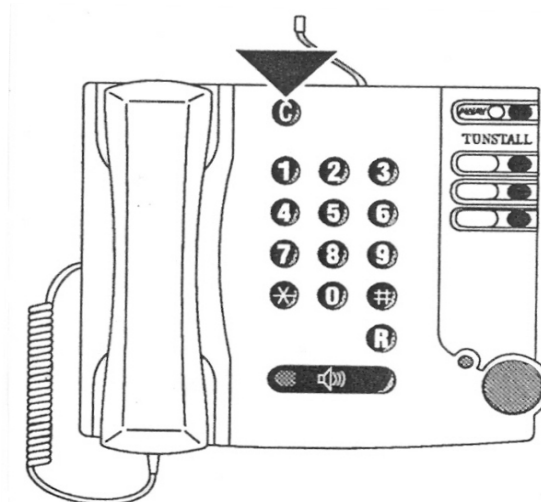

TELEFON *Premier* V VLOGI NAVADNEGA TELEFONA

POGOVOR BREZ DVIGOVANJA SLUŠALKE

Vaš posebni telefon *Premier* deluje tudi kot navaden telefonski aparat z nekaj dodatnimi sposobnostmi. Ena izmed teh je pogovor "brez slušalke", ki vam omogoča sprejem klicev, klicanje ali telefonski pogovor brez dvigovanja oz. držanja slušalke v rokah. V ta namen uporabite gumb "*BREZ SLUŠALKE*".

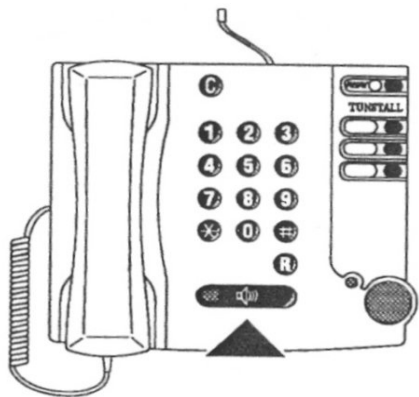

S pritiskom na ta gumb lahko preklopite na način "pogovor brez slušalke" tudi med samim pogovorom. Slušalko odložite, ko zasveti lučka v gumbu "*BREZ SLUŠALKE*".

Med pogovorom "brez slušalke" lahko dvignete slušalko in se pogovarjate naprej preko slušalke. Lučka v gumbu "*BREZ SLUŠALKE*" bo ugasnila.

KAKO SPREJMETE KLIC

Klic lahko sprejmete na več načinov:

Ali: dvignete slušalko;

ali: pritisnete gumb "*BREZ SLUŠALKE*".

ali: pritisnete vaš brezžično sprožilo, čeprav ste oddaljeni od posebnega telefona *Premier*.

KAKO PREKINETE KLIC

1. če ste uporabili slušalko, slušalko odločite;
2. če ste se pogovarjali "brez slušalke", ponovno pritisnete na gumb "*BREZ SLUŠALKE*";
3. če ste klic sprejeli s pritiskom na brezžično sprožilo, klic prekinete s ponovnim pritiskom na rdeči gumb brezžičnega sprožila.

OPOZORILO!


Pritisk na rdeči gumb na telefonu ali brezžičnem sprožilu v tretje bo sprožil klic v sili.

PONOVNO IZBIRANJE ZADNJE KLICNE ŠTEVILKE

Telefon omogoča, da enostavno ponovite klic na zadnjo številko, ki ste jo odtipkali na številčnici telefona, pa je bil klicani naročnik morda zaseden. Postopek je naslednji:

1. položite slušalko;
2. slušalko ponovno dvignite;
3. pritisnite tipko "*R*";

Telefon bo samodejno odvrtil številko, ki ste jo nazadnje izbrali.

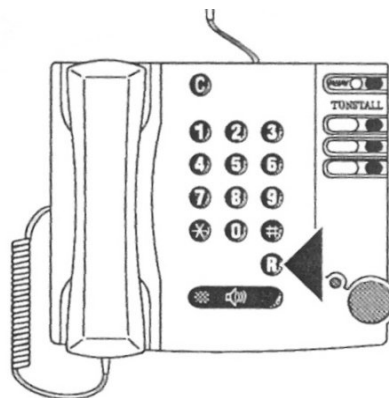

UPORABA TIPK ZA "SKRAJŠANO IZBIRANJE"

Tipke za skrajšano izbiranje vam omogočajo, da s pritiskom na **en sam** gumb telefona izberete eno od treh najpogostejše klicanih števil, ki so vpisane v spomin telefona.

Pritisnite na tistega od treh gumbov za "*SKRAJŠANO IZBIRANJE*", ob katerem je zapisano ime osebe, ki jo želite poklicati. Ob takem klicu vam niti ni treba dvigovati slušalke. Če želite opraviti zaupen pogovor, po vsakem pritisku na gumb za "*SKRAJŠANO IZBIRANJE*" dvignite slušalko.



PROGRAMIRANJE ŠTEVILK ZA SKRAJŠANO IZBIRANJE

Telefonske številke za "SKRAJŠANO IZBIRANJE" vpisujemo, kadar se ne pogovarjamo po telefonu in je slušalka odložena:

1. pritisnite in sprostite zeleno tipko "C";
2. pritisnite in sprostite ustrezní gumb za skrajšano izbiranje (sliši se pisk);
3. vpišite telefonsko številko;
4. ponovno pritisnite zeleno tipko "C";
5. položite slušalko.

S tem je številka vpisana v pomnilnik telefona Premier. Telefon jo bo samodejno odvrtil, kadar boste pritisnili na to tipko za "SKRAJŠANO IZBIRANJE".

OPOZORILO!

Ne pozabite ustrezno označiti, koga bo telefon s tem gumbom poklical!

Postopek ponovite za drugi dve tipki za "SKRAJŠANO IZBIRANJE".

KAKO OZNAČITE, KOMU PRIPADAJO GUMBI?

Z desne strani dvignite plastiko, ki pokriva prostor za zapis imen. Plastiko odstranite, tako da pazljivo iztaknete plastična trna iz lukenj na levi strani.

S pilico za nohte ali podobnim predmetom odstranite prozorno folijo. Na papir vpišite imena ljudi, ki naj bi jih klicali, in namestite folijo na prvotno mesto. Pokrov vtaknite na prvotno mesto, tako da najprej zataknete plastična trna, nato pa narahlo pritisnite pokrov, da se namesti v ležišče.

BRISANJE ŠTEVILKE ZA SKRAJŠANO IZBIRANJE

To lahko opravite, kadar telefon ni v uporabi.

1. Poskrbite, da je slušalka položena.
2. pritisnite in sprostite zeleno tipko "C";
3. pritisnite ustrezní gumb za "SKRAJŠANO IZBIRANJE" številke, ki jo želite zbrisati (telefon zapiska);
4. ponovno pritisnite in sprostite zeleno tipko "C";

Ne pozabite izbrisati tudi pripisanega imena.

OPOZORILO!

Nekateri telefoni imajo sedem gumbov (sedem spominov) za "SKRAJŠANO IZBIRANJE", ki jih programiramo in uporabljamo na zgoraj opisani način!

Telefonska številka, ki jo vpisujemo, lahko vsebuje tudi znak za krajši presledek (4s) pri izbiranju (npr. za čas preklopa med internim in zunanjim telefonskim omrežjem. Za aktiviranje presledka pritisnite tipko "R". Presledek lahko v eni telefonski številki uporabite dvakrat.

DODATKI K POSEBNEMU TELEFONU Premier

Na telefon Premier lahko priključimo naslednje dodatke in naprave :

- stropno potezno stikalo;
- protivlomno alarmno napravo;
- senzor gibanja v prostoru;
- detektor dima (brezžični ali povezan s telefonom Premier z žico);
- senzor nizke temperature;
- druga stikalna tipala.

S pomočjo npr. pohodne blazine, ki je nameščena pod preprogo, telefon opazuje, če ste zadnjih 12 oz. 24 ur sploh vstali iz postelje in stopili na blazino. Če niste, telefon Premier samodejno pokliče na ustrezno telefonsko številko in vzpostavi zvočno povezavo. Tako lahko kar iz postelje pojasnite svoje težave.

Več informacij dobite v Centru za pomoč na domu ali pri zastopniku.



SPREMLJANJE PRISOTNOSTI

Sprejemni center lahko na enostaven način obveščate, kdaj vas ni doma.

IZKLOP SPREMLJANJA


Kadar zapuščate dom za več kot en dan, pritisnite na gumb "NI ME DOMA!". Telefon bo zapiskal, lučka ob tem gumbu pa bo zasvetila.

VKLOP SPREMLJANJA

Spremljanje lahko spet vključite, če:

Ali: Dvignete slušalko;
ali: pritisnete gumb "BREZ SLUŠALKE";
ali: ponovno pritisnete gumb "NI ME DOMA!"

Lučka pri gumbu "NI ME DOMA!" bo ugasnila.

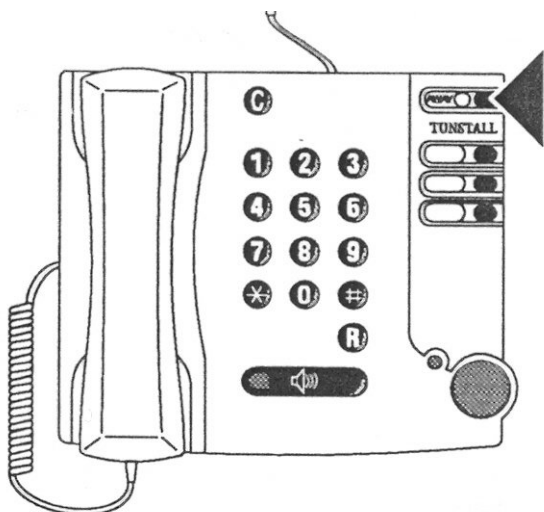


VAŽNE OPOMBE

1. Če telefonsko linijo izključite (potegete vtič iz vtičnice) ali prekinete, bo telefon po eni minuti pričel oddajati opozorilni zvočni signal, dokler linija ne bo priključena. če želite prekiniti piskanje, pritisnite zeleni "C" gumb.
2. V primeru izpada električne energije vas bo telefon *Premier* o tem obvesti z več zaporednimi piski, z vsemi prej opisanimi sposobnostmi pa bo deloval vsaj še 20h. Za to bo poskrbela v telefon vgrajena akumulatorska baterija. Po tem času deluje telefon *Premier* kot navaden telefon. Kadar izpad omrežne napetosti traja več kot eno uro, telefon *Premier* samodejno pokliče v sprejemni center, kamor bo ob izpadu poklical vsake

nadaljnje štiri ure. V tem času bo delovala vgrajena baterija. če se ta popolnoma izprazni, traja nekaj ur, da se ob vzpostavitvi napetosti zopet napolni.

3. Če **telefon *Premier* ne deluje**, preverite, če je priključen na električno omrežje (rdeči gumb na telefonu *Premier* mora svetiti). Preverite, če je telefonska vrstica pravilno vtaknjena v telefonsko vtičnico. Ko ste izključili te možne vzroke odpovedi, telefon pa še ne deluje, stopite v stik s »Centrom za pomoč na domu« ali dobaviteljem vašega telefona *Premier*.
4. Za **nastavitev glasnosti slušalke in zvočnika** je na levi strani telefona *Premier* drsno stikalo s tremi nivoji glasnosti: "NIZEK", "SREDNJI", "VISOK".

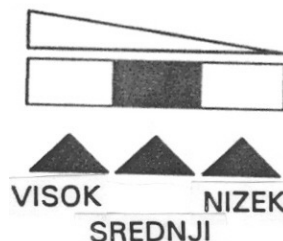

6. Če nosite **slušni aparat** za ušesom, boste telefonski pogovor lahko bolje poslušali, če si boste slušalko prislonili na uho. Stikalo slušnega aparata morate postaviti v položaj "T".




7. Priporočamo, da vzporedno k aparatu *Premier* ne priključujete dodatnih telefonov, ker lahko pride do preobremenitve telefonske linije oziroma oviranja klica v sili.

8. Ob vsakem pritisku na gumb brezžičnega sprožila se bo rdeča lučka na brezžičnem sprožilu prižgala za 3 sekunde. Glede na obnašanje lučke lahko sklepate na stanje baterij v sprožilu:

lučka **sveti**: baterije v dobrem stanju.

lučka **utripa**: **baterije je treba čimprej zamenjati.**

lučka **ne sveti**: **baterije je treba takoj zamenjati.**

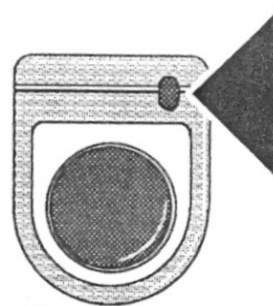

ZAMENJAVA BATERIJ

Za zamenjavo baterij pokličite Center za pomoč na domu. V kolikor želite to opraviti sami, upoštevajte naslednja navodila:

- primate brezžično sprožilo tako, da bosta vijaka obrnjena navzgor.
- z izvijačem odvijte oba vijaka in dvignite pokrovček.
- obrnite brezžično sprožilo tako, da bodo štiri baterije lahko padle ven. Stare baterije zavržite in brezžično sprožilo odložite.
- preverite, da se svetlosivo gumijasto tesnilo v pokrovčku brezžičnega sprožila v vogalih dobro prilega.
- vzemite brezžično sprožilo in ga postavite pokonci tako, da je "GUMB ZA KLIC V SILI" obrnjen proč od vas. Previdno vložite baterije.
- držite brezžično sprožilo pokonci in ponovno namestite pokrovček. Pazite, da se odprtina na pokrovčku prilega rdeči lučki.
- pritisnite pokrovček navzdol in močno pritrdite oba vijaka.
- brezžično sprožilo preizkusite s pritiskom na alarmni gumb tako, da pokličete Center za pomoč na domu. Rdeča luč se prižge in ostane prižgana približno 5 sekund.

DOVOLJENJA

Odobreno za uporabo v Sloveniji v skladu z navodili za uporabo:

PTT atest št.:346-17/001/92

RSO atest št.:NN0491081

Certif. el. varnosti št.:P5344-119/91

Zastopstvo in prodaja:

MKS Elektronski sistemi d.o.o

Rožna dolina C.XVII/22b

1000 LJUBLJANA

tel/fax (01) 256-22-43, 256-22-44

